

Quadrostar Pro Yellow

Единственный на рынке **желтый** лазер с длиной волны 577 нм- наиболее оптимальный для сосудистых процедур



Применение

Поверхностные васкулярные и доброкачественные пигментные образования

Телеангиоэктазии, купероз кожи, паутинные невусы

Высыпные ангиомы, ангиомы на губах

Мелкие гемангиомы, винные пятна, сосудистые "звездочки"

Бородавки, гиперплазия сальных желез, лентиго

Анализ рынка

На рынке косметологических процедур на лазерах, сосудистые процедуры являются одними из самых востребованных. Это служит важным показателем высокого потенциала привлечения клиентов на QuadroStar Pro Yellow.



О ЛАЗЕРЕ

Преимущества

- Высокая производительность и надежность
- Максимальное поглощение гемоглобина
- Низкое поглощение меланина для меньшего количества побочных эффектов
- Сканер со встроенным охлаждением кожи
- Однородный профиль луча для максимальной точности
- Небольшие, компактные, легкие системы
- Отсутствие расходных материалов
- Доступен транспортировочный кейс




6 РЕЖИМОВ ЛЕЧЕНИЯ

- Фиксированный размер лечебного пятна (1 мм) и автоматическая установка позволяют быстро и безопасно установить параметры для стандартных процедур.
- Размер лечебного пятна и длительность импульса могут быть установлены для оптимизации процедур.
- Импульсы испускаются в последовательности: импульс длительностью 3 мс, затем с паузой в 3 мс для щадящего лечения более сложных поражений.
- VARIX В этом режиме врач может непосредственно установить мощность, длительность импульса и паузу между импульсами. Общая энергия и время также отображаются на дисплее.
- Пользователь может регулировать необходимую мощность и лечение осуществляется при непрерывном излучении.
- SCAN Этот режим активируется автоматически при подключении сканера. Благодаря сканеру со встроенным охлаждением кожи и регулируемой скоростью покрытия можно еще быстрее и комфортнее обрабатывать большие площади.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Лечение сосудистых заболеваний:

QuadroStar PRO YELLOW (577 нм) идеально подходит для лечения порт-вайновых пятен, гемангиом, расширенных капилляров и купероза. Сканер с интегрированным охлаждением кожи снижает побочные эффекты и ускоряет регенерацию.

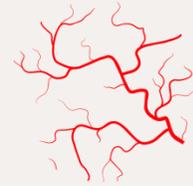

Лечение пигментации:

QuadroStar PRO YELLOW эффективно устраняют нежелательные пигментные пятна, коагулируя пигмент и способствуя его расщеплению в процессе заживления.



Сканер с охлаждением кожи:

Аксессуарный сканер с функцией охлаждения кожи для QuadroStar PRO GREEN и YELLOW обеспечивает эффективную обработку обширных зон, улучшая комфорт пациентов.



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА (QUADROSTAR PRO YELLOW)


Эффективность по оксигемоглобину:

QuadroStar PRO Yellow - единственный лазер в мире с длиной волны 577 нм, наиболее эффективной для оксигемоглобина крови. Это делает его процедуры по лечению сосудистых патологий, таких как красные сосуды на лице и другие зоны с быстрой скоростью движения крови, максимально эффективными. Другие лазеры имеют менее эффективные длины волн.



Сканер с охлаждением кожи:

Лазер оснащен сканером со стеклом, которое одновременно охлаждает кожу во время процедуры. Это минимизирует осложнения, делая процедуры по лечению розацеи, сосудистых патологий и мелазмы более безопасными.

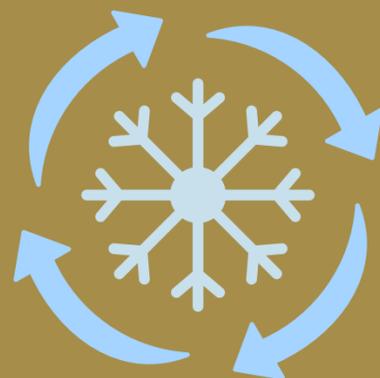

Профилактика осложнений:

QuadroStar PRO Yellow необходим для всех клиник, использующих другие лазеры, так как он снижает риск осложнений. Процедуры, проведенные на этом лазере, предотвращают пигментацию при использовании других лазеров.



Лечение мелазмы:

Единственный лазер, способный эффективно останавливать мелазму, распространенную среди женщин и мужчин в регионе. Лазер удаляет винные пятна и гемангиомы с высокой эффективностью, как показано в клинике Розы Агабековны.



Клинические случаи (фото до и после) (quadrostar pro yellow)

Купероз/Розацеа: Spot 1mm, 12J/cm², 19ms




Через 3 недели после 1 лечения

Немедленная реакция:



Реакция после использования Сканера: Осветленная область сканирования

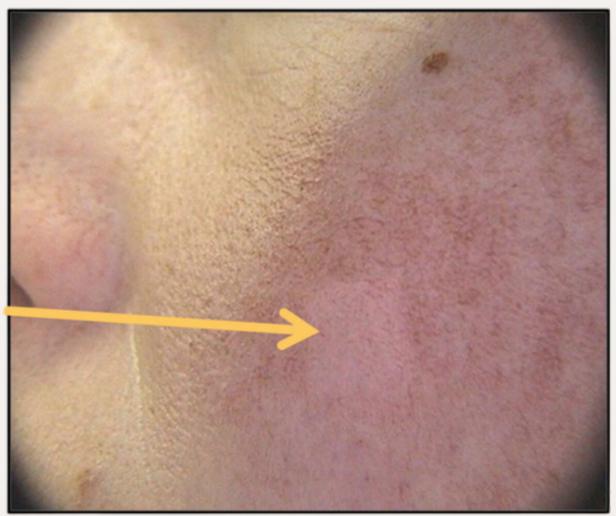

Телеангиэктазия (нос)



Телеангиэктазия: Сканер 0% (Размер пятна) , 19J/cm², 11ms




Через 5 дней после 1 обработки 3 недели
Немедленная реакция :



- Телеангиэктазия



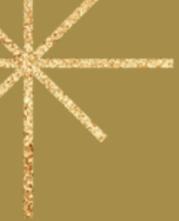

ВИДЕОРОЛИКИ

<https://www.youtube.com/watch?v=8f6oGFv6mM4&t=175s>

Лечение розацеа после обморожения пациента

<https://www.youtube.com/watch?v=Ke5HMePG7lQ>

Лечение розацеа и покраснения лица

<https://www.youtube.com/watch?v=O514483SjlU>

Ознакомительная демонстрация работы лазера по различным показаниям

https://www.youtube.com/watch?v=aiCz_zHWOAE

Лазерное омоложение кожи, лечение мелазмы, черных точек, и другие процедуры

https://www.youtube.com/watch?v=aiCz_zHWOAE

Удаление сосудов, лечение гемангиом у детей в клинике Гемангиома



Клиника Гемангиома Розы Агабековны- успешный кейс

С гордостью представляем один из успешных кейсов на нашем лазере Quadrostar Pro Yellow – клиника "Гемангиома" в Астане. Основательница клиники, Роза Агабековна, создала социально ориентированное медицинское учреждение, специализирующееся на лечении кожных патологий у детей.

Используя всего лишь одну из нескольких уникальных возможностей лазера Quadrostar Pro Yellow – эффективное лечение гемангиом у детей, Роза Агабековна смогла занять узкоспециализированную нишу на рынке и превратить свой бизнес в успешный и прибыльный. При этом, государство дало высокую оценку ее новаторским методикам.

Благодаря успешным результатам лечения гемангиом у детей, клиника "Гемангиома" завоевала признание в обществе, а сама Роза Агабековна выступила с докладом в Медицинском центре Назарбаев Университета в Астане и на базе Asclepion Laser Technologies в Германии. Это лишь один из множества примеров успешного применения лазеров Asclepion Laser Technologies нашими клиентами!





QUADROSTAR PRO

РАСЧЕТ ПРИБЫЛЬНОСТИ

Процедура	Количество пациентов в неделю	цена евро	Выручка за процедуру в тенге в неделю	количество необходимых процедур на одного пациента	Длительность процедуры (в минутах)	Длительность всех процедур на одного пациента в неделю.	Период между процедурами	ИТОГО выручка
Удаление доброкачественных новообразований	9	20 000,00 ₸	180 000,00 ₸	4	30	1080,00	4 to 6 недель	720 000,00 ₸
Удаление сосудистых патологий	5	10 000,00 ₸	50 000,00 ₸	4	15	300	4 to 6 недель	200 000,00 ₸
Розацеа	5	68 000,00 ₸	340 000,00 ₸	4	30	600	4 to 6 недель	1 360 000,00 ₸
Миелазма	10	68 000,00 ₸	680 000,00 ₸	4	30	1200	4 to 6 недель	2 720 000,00 ₸
Удаление пигментации	10	20 000,00 ₸	200 000,00 ₸	4	10	400	4 to 6 недель	800 000,00 ₸
Омоложение	5	39 000,00 ₸	195 000,00 ₸	4	30	600	4 to 6 недель	780 000,00 ₸
Лечение акне	5	15 000,00 ₸	75 000,00 ₸	4	30	600	4 to 6 недель	300 000,00 ₸
Итого	30		1 720 000,00 ₸		Время в часах	46,7		6 880 000,00 ₸

Среднерыночная прибыльность в месяц **6,880,000 ₸**

Одни из наших клиентов

